

Monitor de Salud GMON

GMON – Comenzar: primeros pasos

Información importante sobre la protección de datos

El programa/software GMON sirve para almacenar, mostrar y evaluar las informaciones de medición de parámetros vitales, especialmente en lo que se refiere a análisis de pacientes, por parte del usuario del programa.

Para asignar los datos y mediciones a cada paciente, y especialmente para su seguimiento posterior, es necesario asignar un número único de identificación a cada paciente (número ID). La evaluación de los resultados de medición requiere haber introducido y guardado primero los datos personales de fecha de nacimiento y sexo.

Todos los demás datos sobre la información personal de cada paciente que permitirían analizar y sacar conclusiones sobre su estado son opcionales. Sin embargo, en caso de recoger estos datos, deberá hacerse según la política de privacidad aplicable al usuario del programa/software GMON y con el consentimiento del paciente. La protección de los datos debe estar asegurada por el administrador del sistema, con una restricción de acceso a la base de datos protegida con contraseña. El administrador responsable del sistema informático deberá tomar las medidas apropiadas contra todo software potencialmente dañino (virus, caballos de Troya, spyware, etc.)

Seguridad del Ordenador

El cliente/usuario está obligado a impedir la puesta en riesgo del sistema informático en el cual haya instalado el programa « Health Monitor GMON » de la compañía Medizin & Service GmbH, de todo software dañino o malicioso. Medizin & Software GmbH recomienda el uso de un software antivirus o anti malware (según el dominio de aplicación del sistema) para proteger el sistema informático de accesos no autorizados por parte de terceros. Medizin & Service GmbH no podrá ser responsabilizado de cualquier perjuicio causado por Anti-Virus o Malware.

Requerimientos mínimos del sistema

- Microsoft Windows XP / Vista / Win7 / Win 8 / Win 10
- Pantalla:
 - Resolución de mínimo 1024 x 768 (con tamaño de fuente de 96 ppp)
 - Profundidad de color de al menos 24 Bit

Instalación – paso a paso para instalar el Health Monitor GMON

- Inserte el CD en su ordenador.
- Si la instalación no arranca automáticamente, haga doble clic sobre el archivo <Setup.exe>

Monitor de Salud GMON

GMON – Comenzar: primeros pasos



- Siga las instrucciones de instalación que aparecerán en pantalla.
- Utilice la configuración por defecto para un uso estándar del software.
- Cuando aparezca la ventana correspondiente, introduzca el número de serie y el código (los encontrará en la pegatina del CD):



- Complete la instalación.
- El programa se iniciará automáticamente.

Opciones de instalación

El programa GMON está asociado a una licencia de único usuario. Para todo ordenador en el que utilice GMON, necesitará una licencia válida GMON.

Existen licencias para usuarios múltiples ; además, es posible instalar la base de datos GMON SQL en un servidor externo de una red local (utilidad para usuarios múltiples de la base de datos desde diferentes puestos de trabajo).

Puede ver más información sobre la instalación de la base de datos FireBird en red local en este enlace : <http://www.gmon.eu/faq-network>, así como en <http://www.firebirdsql.org>.

Monitor de Salud GMON

GMON – Comenzar: primeros pasos

Comenzar a utilizar el programa GMON

Comience por « Administración GMON »: puede crear un fichero para cada paciente o cliente en GMON con el comando «GMonAdmin.exe». Haga doble clic sobre el icono para ejecutar el programa. Aparecerá una pantalla en la cual podrá registrar todos los datos administrativos principales.

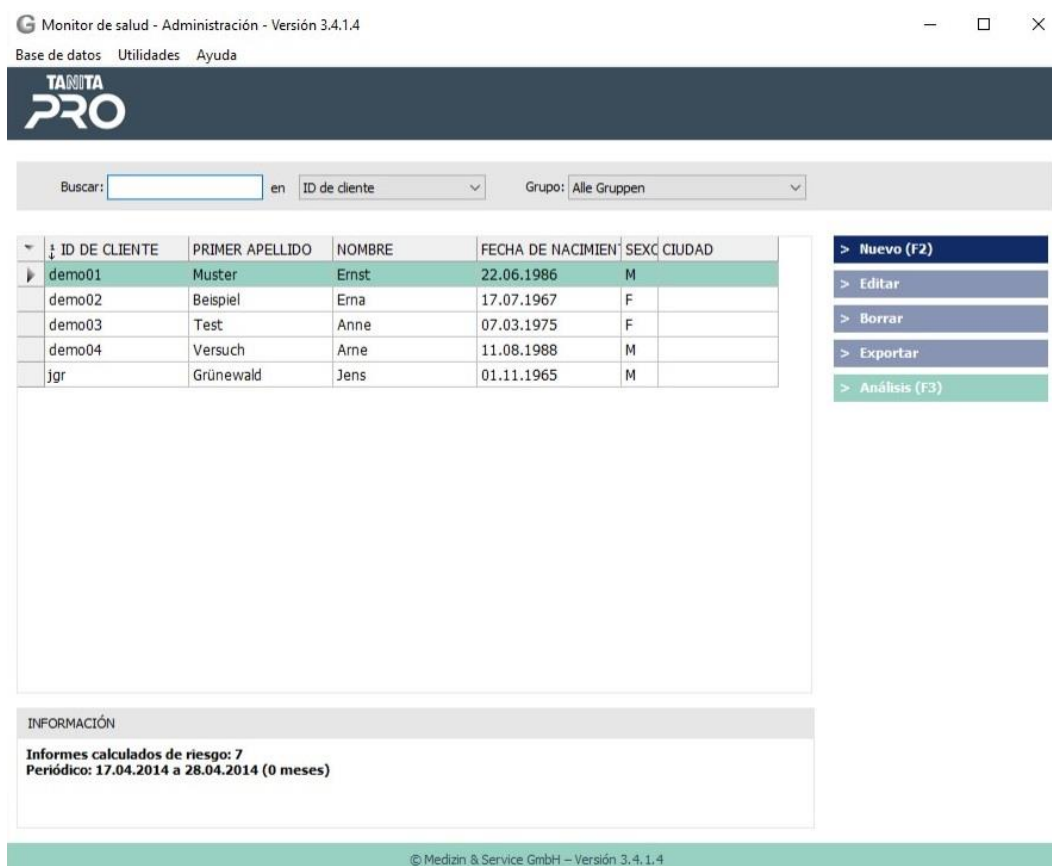


Imagen: pantalla principal de GMON Administration

Tras la activación inicial, puede instalar uno o varios registros de datos. Haga clic en la pantalla sobre el icono <Nuevo (F2)> o pulse en su teclado la tecla <F2>. Se iniciará un diálogo en pantalla en la cual podrá escribir los datos del cliente o paciente (tengan en cuenta las notas sobre protección de datos, ver más arriba en este mismo documento). El nuevo registro aparecerá en la lista si lo ha creado correctamente (ver nuestra imagen de ejemplo). Si hay varios registros de datos, puede seleccionar el que necesita simplemente haciendo clic sobre la línea del paciente/cliente.

Comenzar a utilizar « GMON Health Monitor »: haga doble clic sobre el icono "GMON Health Monitor" para acceder directamente al programa GMON. Este acceso rápido sólo es mejor (más cómodo) si tiene solamente unos pocos usuarios registrados (por ejemplo, los miembros de una misma familia).

Monitor de Salud GMON

GMON – Comenzar: primeros pasos

Se abrirá la pantalla inicial y podrá seleccionar la lengua de uso y abrir el programa haciendo clic sobre “abrir GMON”:



Imagen: pantalla inicial GMON

El acceso individual a los datos personales está protegido por una pantalla de conexión suplementaria que aparece tras la pantalla de inicio :



Imagen: pantalla GMON de conexión


Monitor de Salud GMON

GMON – Comenzar: primeros pasos

Para seleccionar un registro, necesitará asignar un número de identificación para cada cliente específico sobre la base de datos. Además, puede proteger dichos datos con una contraseña, si asigna una al crear el perfil. Es importante no perder u olvidar el nombre de usuario y la contraseña de cada paciente, ya que si no los mete correctamente le será imposible abrir el perfil y los datos. Los números de identificación de cada usuario se crean a través de la pantalla del Administrador GMON.

Si introduce un número de identificación erróneo, aparecerá un mensaje de error, *“usuario no encontrado”*. Si introduce mal una contraseña, aparecerá el mensaje *“contraseña errónea”*. Si aparecen estos mensajes, deberá introducir el nombre de usuario y la contraseña de nuevo.

Sistema de ayuda

Para las instrucciones detalladas de cómo utilizar el programa, y para la interpretación y evaluación de los valores de la medición, puede dirigirse a la lista de documentos en formato pdf en la sección  .

Estos documentos están asimismo en el CD de instalación, en «prog / help /...» o tras la instalación, en el directorio «... \ MedServ \ GMon3 \ Help \ ...» en alemán (DE) y en inglés (EN) respectivamente. Encontrará una vista previa de todos los ficheros de ayuda en [GMON EN Module.pdf](#).

GMON como herramienta médica

El programa “Health Monitor – GMON” está clasificado como dispositivo médico bajo la directiva 93/42/EEC. Esto es válido para la gama de aparatos con número de serie SNR 30-xxxx, indicados en la declaración de conformidad CE (ver [GMON CE.pdf](#)).